

Triumph Essentials Shopping Rollator

Item#: 700-5000



Instruction Booklet
Livret d'instructions

TRIUMPH
essentials

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Introduction

Thank you for your purchase of a Triumph Essentials Shopping Rollator. Please ensure that all users review the instructions carefully prior to use and are familiar with safety and operating instructions. Before using your new Triumph Essentials Shopping Rollator, please check that no damage to the frame or parts has occurred during shipping.

Merci d'avoir acheté un déambulateur Triumph Essentials.

Veillez vous assurer que tous les utilisateurs lisent attentivement les instructions avant utilisation et connaissent les consignes de sécurité et d'utilisation. Avant l'assemblage et l'utilisation de votre nouveau Triumph Essentials Walker, assurez-vous que le cadre et les pièces n'ont pas été endommagés pendant le transport.

Components / Composants



1. Handle / Poignée
2. Hand brake / Frein à main
3. Hand brake lock / Verrouillage du frein à main
4. Height adjustment lever / Levier de réglage de la hauteur
5. Seat / Siège
6. Folding handle strap / Sangle de pliage
7. Shopping bag / Sac de courses
8. Cane holder (not shown) / Porte-canne (non représenté)
9. Bottle holder (not shown) / Porte-bouteille (non représenté)

**WEIGHT CAPACITY /
POIDS SUPPORTÉ:
300 LBS (136 KG)**

For your safety / Pour votre sécurité

 <p>Read the instructions Lire les instructions</p>	 <p>Do not use as a rollator when someone is sitting on the seat. Ne pas utiliser comme déambulateur lorsque quelqu'un est assis sur le siège.</p>	 <p>Do not use the rollator to carry heavy objects. Ne pas utiliser le déambulateur pour transporter des objets lourds</p>
 <p>Do not use on stairs. Ne pas utiliser dans les escaliers</p>	 <p>Do not use on escalators. Ne pas utiliser dans les escalators</p>	<p>Weight capacity La capacité de poids</p>  <p>≤ 300 lbs (136 kg)</p>
 <p>Do not stand on seat. Ne pas se tenir debout sur le siège</p>	 <p>Exercise caution when walking on sloped surfaces. Marcher prudemment sur les surfaces inclinées</p>	 <p>Do not hang objects from the back rest. Ne pas accrocher d'objets au dossier</p>

For your safety

Please read these important tips to ensure your safety and get the most out of your rollator.

When using your rollator

1. When using the rollator, ensure that the rollator is fully opened and locked in position.
2. Always confirm the handle height adjustment levers are in the closed position.

Care and maintenance

1. Do not use on stairs or escalators.
2. Never use the rollator in a moving vehicle

Pour votre sécurité

Veillez lire ces conseils importants pour assurer votre sécurité et tirer le meilleur parti de votre déambulateur.

Lorsque vous utilisez votre déambulateur

1. Lorsque vous utilisez le déambulateur, assurez-vous que celui-ci est complètement ouvert et que les cadres latéraux sont verrouillés en position.
2. Vérifiez toujours que les poignées sont à la même hauteur et que les leviers de réglage de la hauteur sont en position fermée.

Entretien et maintenance

1. N'utilisez pas le déambulateur dans les escaliers ou les escalators.
2. N'utilisez jamais le déambulateur dans un véhicule en mouvement.

Open frame
Ouvrir le cadre



Hold the bar behind the seat and push it forward
Tenez la barre derrière le siège et poussez-la vers l'avant

**Adjust handles to
desired height**

Ajustez les poignées à la
hauteur souhaitée




**How to use brakes To
slow down**

Comment utiliser les
freins pour ralentir



To lock rear wheels

Pour bloquer les roues
arrière

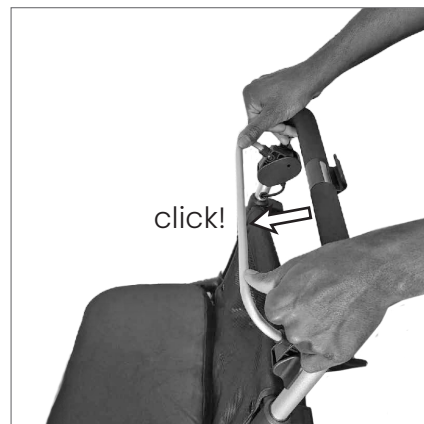

**Handbrake for seated
position**

Frein à main pour
position assise



Swivel Front wheels

Roues avant pivotantes

1. Fixed front wheels / Roues avant fixes
2. Swivel front wheels 45° / Roues avant pivotantes à 45°
3. Swivel front wheels 360° / Roues avant pivotantes à 360°



Seat Position – Sitting

Position du siège – Assis



Seat Position – Shopping bag

Position du siège – Sac de courses



Bag access

Accès au sac



Cup holder
Porte-gobelet



Cane holder
Porte-canne




Folding & Storage

Pliage et rangement

To fold the rollator

Pour plier le déambulateur

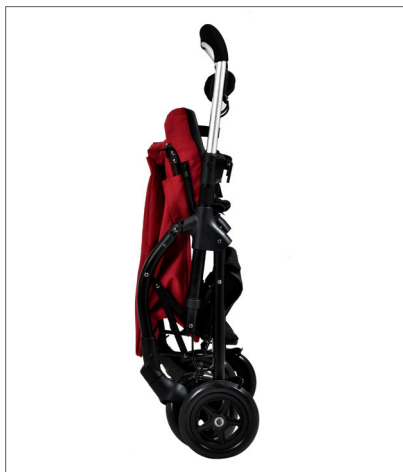

Warranty / Garantie

Triumph covers the Essentials rollator with a two (2) year warranty on the frame. All other components are covered for one (1) year against defects in material and workmanship.

This warranty is valid for the original purchaser only and is not transferable. Triumph Mobility will not warranty any parts that have been damaged due to improper installation, modification, and / or misuse.

For warranty service, please return your rollator to your local dealer . Service charges are of the discretion of the dealer and are not the responsibility of Triumph Mobility.

Triumph couvre le déambulateur Essentials avec une garantie de deux (2) ans sur le cadre. Tous les autres composants sont couverts pendant un (1) an sur les défauts de matériaux ou de fabrication.

Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Triumph Mobility ne garantira aucune pièce qui aurait été endommagée en raison d'une installation, d'une modification et/ou d'une utilisation incorrecte.

Pour le service de garantie, veuillez rapporter votre déambulateur à votre revendeur local. Les frais de service sont à la discrétion du concessionnaire et ne relèvent pas de la responsabilité de Triumph Mobility.

Specifications / Caractéristiques

Essentials Shopping Rollator (700-5000)

Seat height Hauteur du siège	21" (53 cm)
Handle height range Plage de hauteur des poignées	37" - 39.75" (94 - 101 cm)
Seat size Taille du siège	14" x 9.5" (35.6 x 24 cm)
Distance between wheels Distance entre les roues	13.75" (35 cm)
Overall width Largeur globale	20.5" (52 cm)
Overall length Longueur globale	28.25" (71.75 cm)
Depth folded Profondeur plié	12" (30.5 cm)
Wheel diameter (front) Diamètre de roue (avant)	8" (20 cm)
Wheel diameter (back) Diamètre de roue (arrière)	7" (17.75 cm)
Weight capacity (front bag) Charge max (sac avant)	11 lbs (5 kgs)
Weight capacity (rear bag) Capacité de poids (sac arrière)	33 lbs (15 kgs)
Weight capacity Charge max	300 lbs (136 kgs)
Rollator weight Poids du déambulateur	18 lbs (8.2 kgs)



Read instructions carefully before use
Triumph Essentials Shopping Rollator is designed for indoor/outdoor use
Instruction manual must be given to the user

Lire attentivement les instructions avant utilisation
Triumph Essentials déambulateur est conçu pour une utilisation
intérieure/extérieure
Le manuel d'instructions doit être remis à l'utilisateur.

Triumph Mobility
151 Bentley Ave., Unit 4, Nepean, ON, K2E6T7
info@triumphmobility.com
1.855.546.0711

This manual is subject to updates and changes without notice.
Please check www.triumphmobility.com for most current version of this document.

Ce manuel est sujet à des mises à jour et à des modifications sans préavis.
Veuillez consulter le www.triumphmobility.com pour obtenir la version la plus récente de ce document.